


## ソフトコンタクトレンズとレンズケア用品の適合性(相性)について

道玄坂糸井眼科医院  
院長 糸井素純

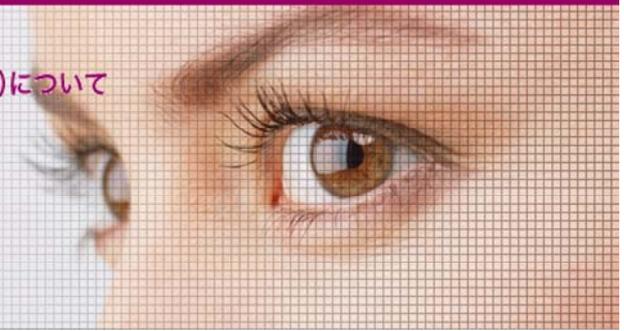

## 試験結果 ステイニング総スコア一覧

※試験は2006年から2009年にかけて実施し、この時期に市場に流通していたコンタクトレンズおよびレンズケア用品を用いています。

### ステイニング・カラーコード

- 青:  $0 \leq$  ステイニング総スコア  $\leq 1.0$  (ステイニングはほとんど起きていない組合せ)
- 緑:  $1.0 <$  ステイニング総スコア  $\leq 2.5$  (あまりステイニングが起きていない組合せ)
- 黄:  $2.5 <$  ステイニング総スコア  $\leq 4.0$  (患者さんによっては中等度または強いステイニングが起きている組合せ)
- 赤:  $4.0 <$  ステイニング総スコア (多くの患者さんで強いステイニングが起きている組合せ)

### ② 使用1週間後のレンズを用いた試験

	オプティ・フリー プラス	レニュー マルチプラス	エピカールド
<u>O<sub>2</sub>オプティクス</u>	<u>1.2</u>	<u>4.5</u>	<u>1.5</u>
<u>アキュビュー アドバンス</u>	<u>1.1</u>	<u>3.1</u>	<u>1.1</u>
<u>アキュビュー オアシス</u>	<u>1.2</u>	<u>3.2</u>	<u>1.1</u>
<u>2ウィークプレミオ</u>	<u>1.1</u>	<u>4.7</u>	<u>1.9</u>
消毒成分	ポリクオッド (塩化ポリドロンウム)	PHMB(塩酸ポリヘキサニド系)	